

COVID-19 | Отбор пробы с помощью раствора для полоскания


Инструкция для частных медицинских кабинетов и центров тестирования

SYNLAB предлагает разные методы отбора проб для тестирования на предмет заражения SARS-CoV-2. В этом документе описан отбор пробы с помощью раствора для полоскания. Этот метод не только намного приятнее других, но и позволяет уменьшить количество прямых контактов, потому что отбор пробы выполняется самим тестируемым. Обратите внимание, что носоглоточный мазок все еще остается «золотым стандартом».


В первой части инструкции описывается подготовка документов и принадлежностей, необходимых для отбора пробы. Во второй части приводится порядок действий для получения пробы

Полностью прочтите инструкцию, прежде чем приступать к отбору пробы.


Проверьте имеющиеся материалы и убедитесь, что есть все, что показано здесь.

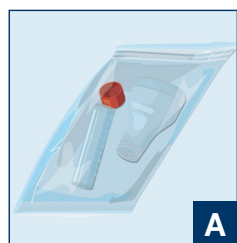

Пробирка для слюны с маркировкой и воронка

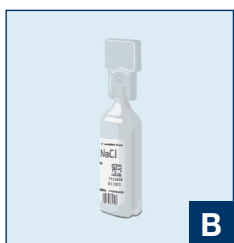

Ампула с 5 мл NaCl

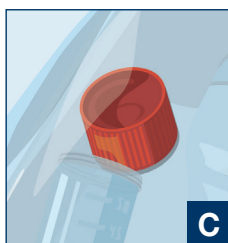

Колпачок для закрытия пробирки со слюной



1 транспортировочная пробирка со впитывающей бумагой



1 самоклеящаяся этикетка со штрихкодом

После завершения отбора пробы не забудьте приклеить к пробирке со слюной (A) этикетку со штрихкодом (E).




тестируемому за 30—60 минут до отбора пробы **нельзя ничего есть, пить, курить, жевать жевательную резинку и чистить зубы. (Иными словами, в течение 30—60 минут до теста ничего нельзя брать в рот.)**

Тестируемый **должен быть в маске**, и может снять ее только для полоскания.


В целях гигиены/дезинфекции подготовьте также: перчатки, дезинфицирующее средство, пакет для отходов.

Во время полоскания возможно образование **аэрозолей**. Если это возможно, тестируемый во время отбора пробы должен быть один в помещении или находиться на безопасном расстоянии. После проведения теста необходимо хорошо проветрить помещение и продезинфицировать рабочую область.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ОТБОРУ ПРОБЫ

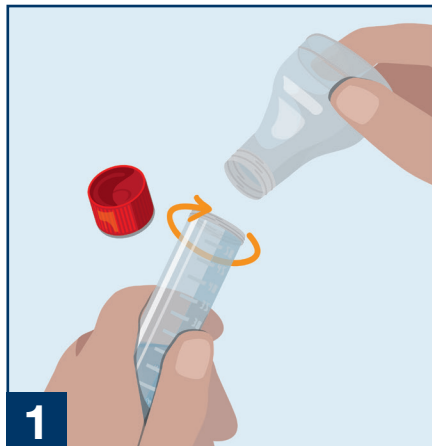

1 Навинтите воронку на пробирку для слюны.

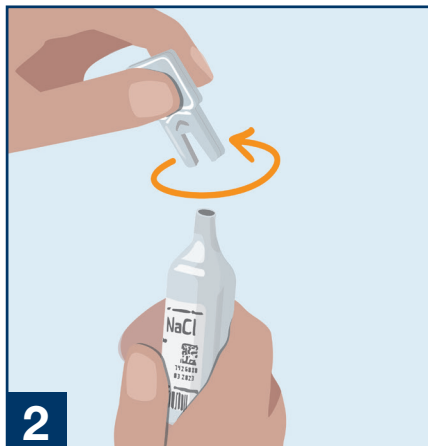


2 Отвинтите крышку от ампулы с NaCl.

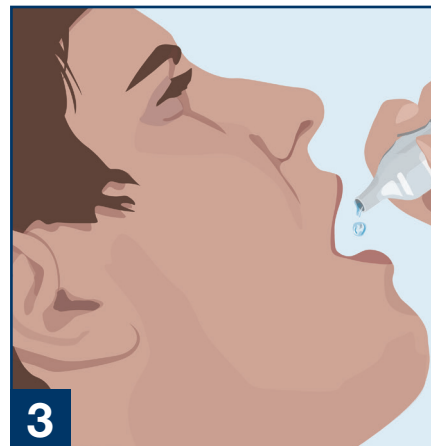


3 Тестируемый должен выдать все содержимое ампулы в рот.

Полоскать горло в течение 30 секунд!


Можно делать паузы, оставляя раствор для полоскания во рту и дыша через нос.

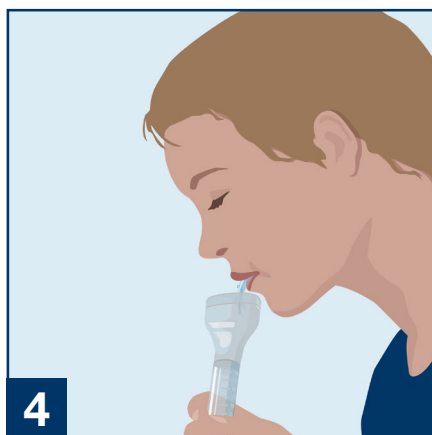


4 Затем тестируемый должен выплюнуть весь раствор для полоскания в воронку, привинченную к пробирке для слюны.

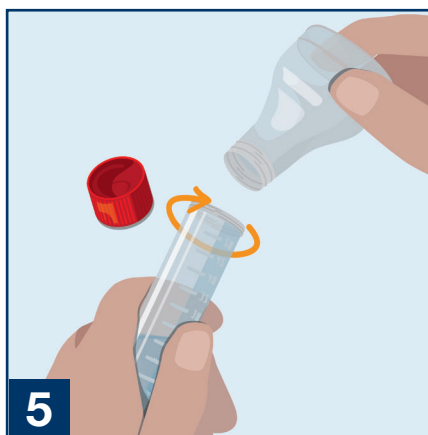


5 Отвинтите воронку и закройте пробирку крышкой из комплекта поставки.

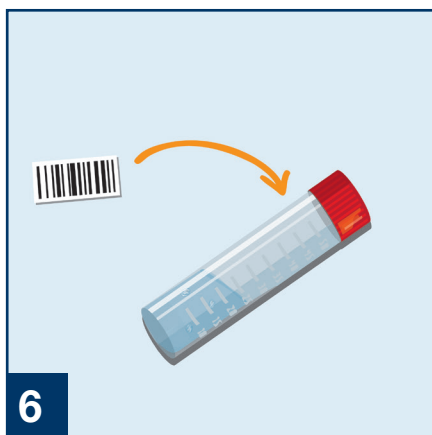

6 После этого приклейте этикетку со штрихкодом к пробирке со слюной.

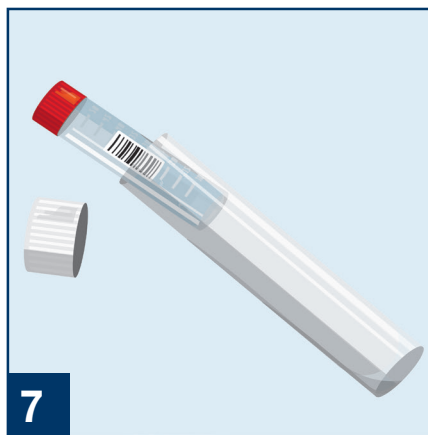

7 Поместите правильно подписанную и закрытую пробирку в транспортировочную пробирку.

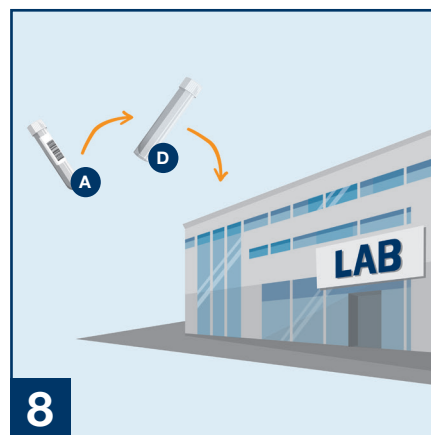

8 Пересылка осуществляется согласно согласованным логистическим процессам: поместите пробирку со слюной (A) сначала в транспортировочную пробирку (D), а затем в емкость для транспортировки, предоставленную компанией SYNLAB (сумка, лабораторный пакет, бокс и т. п.).