


Wichtige Informationen zum BD SurePath™ Einsendegefäss

Das BD SurePath™ Einsendegefäss verfügt über eine Vorrichtung, welche das Abstreifen des Bürstenkopfes erleichtert. In Kombination mit der Rovers Cervex-Brush (abnehmbarer Kopf) gelangen so 100% des entnommenen Zellabstrichs zur Bearbeitung in das Labor. Das BD SurePath™ kann wie gewohnt mit dem PrepMate verwendet werden.

Vorgehen für die einfache und effiziente Probeentnahme:

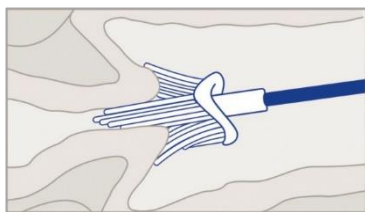

1. Probe entnehmen

Portio-/Cervixabstrich
(gemäss den Angaben der Instrumentenhersteller)



2. Abtrennen

Führen Sie den Bürstenkopf in die grosse Öffnung des BD SurePath™ Einsendegefässes ein. Durch Drehen des Stils kann dieser vom Bürstenkopf getrennt werden.



3. Einsenden

Das BD SurePath™ Einsendegefäss verschliessen und den **MEDISYN Barcode senkrecht auf die Probe kleben**. Das Einsendegefäss zusammen mit dem neuen, ausgefüllten Pathologie-Auftragsformular ins MEDISYN Labor senden.

Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre/n Kundenbetreuer/in oder rufen Sie unser Customer Service Center (0800 393 393) an. Bei ärztlichen Fragestellungen werden wir Sie auch gerne direkt mit dem/der zuständigen Zytopathologen/- Zytopathologin verbinden.