





## FIT-SCREENING – DARMKREBS FRÜH ERKENNEN


### ANLEITUNG ZUR PROBEENTNAHME

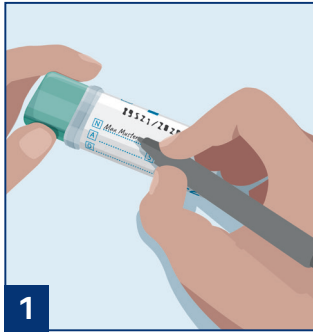

1 Proberöhrchen beschriften:  
 Vor- und Nachname  
 Geburtsdatum  
 Datum der Probennahme

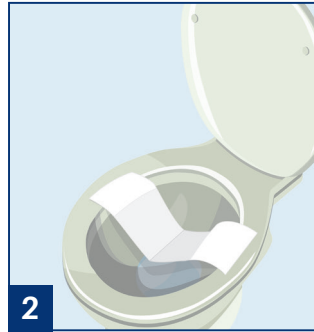

2 Stuhlfänger (im Kit) als Auffanghilfe in die Toilette legen.

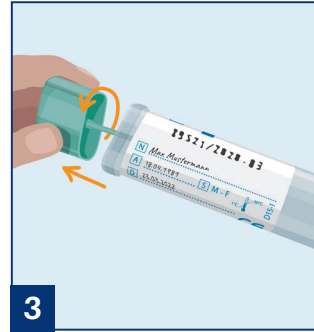


3 Proberöhrchen durch Drehen öffnen und die türkise Kappe samt Teststab herausziehen.



4 Mit der Spitze des Teststabs an verschiedenen Stellen über die Stuhlprobe streichen.



5 Teststab nicht überfüllen.  
Nur die Rillen der Spitze müssen danach mit Stuhlprobe gefüllt sein. Eine kleine Probenmenge ist ausreichend.

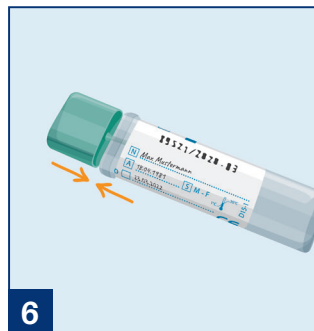

6 Teststab nur einmal in das Proberöhrchen stecken und dieses mit einem hörbaren «Klick» verschliessen.  
Probennahme nicht wiederholen!



7 Proberöhrchen kräftig schütteln und in die grüne (lichtgeschützte) Tüte legen.



8 **Bitte legen Sie die Tüte mit dem ausgefüllten Testanfrageformular** Ihres Arztes in das beigelegte vorfrankierte Rückantwortcouvert. Senden Sie die Probe am Entnahmetag oder am darauffolgenden Tag via Post zurück. Sie können die Probe auch in einem MEDISYN Labor in Ihrer Nähe abgeben\*.

\* Eine Liste aller MEDISYN Entnahmezentren und Labors finden Sie hier: [www.medisyn.ch](http://www.medisyn.ch)

